




86% der Patienten bevorzugten die AirFit F20 gegenüber der bisher verwendeten Full Face Maske im Hinblick auf die Abdichtung.¹

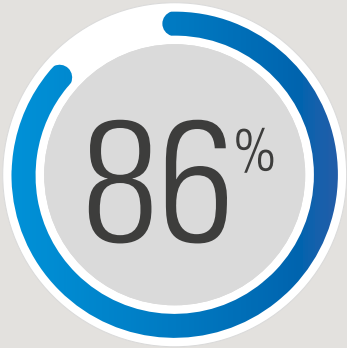

Hochentwickelte Maskenkissen-Technologie: Variable Stärke für mehr Komfort und Stabilität

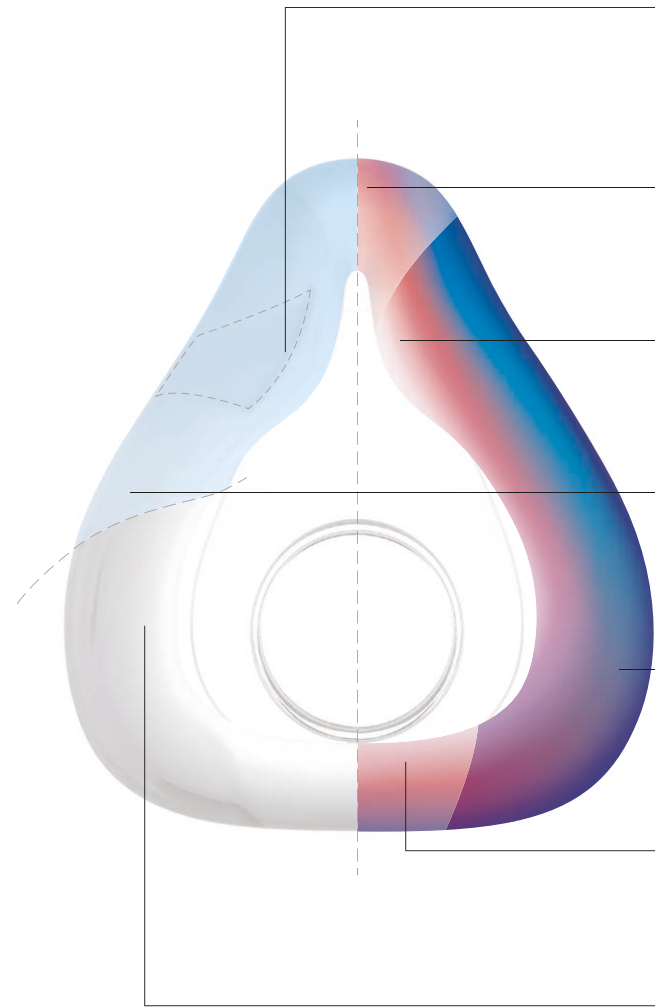


- Innovative doppelwandige Schlaufen**
Sorgen für gleichbleibend stützenden Halt – für eine zuverlässige Abdichtung, unabhängig von Gesichtsform, Therapiedruck oder Maskenbewegung.
- Weicher Nasenrücken**
Passt sich dem Nasenrücken des Patienten an – für mehr Komfort, verhindert Druckstellen.
- Anpassungsfähige Flügel**
Die seitlichen Flügel der Maske passen sich einer Vielzahl von Gesichtsformen an.
- Mattierte Silikonoberfläche**
Weichere Textur des Maskenkissens im empfindlichen Nasenbereich – für eine angenehmere Abdichtung und leichtere Anpassung.
- Stützender Rand**
Gibt den anpassungsfähigen Bereichen des Maskenkissens die für eine sichere Abdichtung erforderliche Stabilität.
- Konturierter Kinnbereich**
Liegt besser am Kinn des Patienten an – für mehr Tragekomfort und verbesserte Abdichtungsleistung bei Bewegung.
- Polierte Silikonoberfläche**
Sorgt für eine angenehme, zuverlässige Abdichtung im Bereich von Mund und Kieferpartie und verhindert gleichzeitig ein Hochrutschen des Maskenkissens.

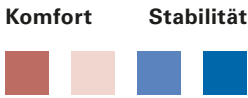

Anleitung zum Anlegen der AirFit F20

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- Stellen Sie zuerst sicher, dass die Magneten an den unteren Bändern von den Clips gelöst sind.
 - Wenn sie nicht gelöst sind, ziehen Sie sie mit einer Drehbewegung vom Rahmen ab.
 - Halten Sie die Maske an Ihr Gesicht. Achten Sie dabei darauf, dass der obere Maskenrand auf Höhe der Nasenwurzel verläuft.
 - Ziehen Sie das Kopfband über den Kopf. Achten Sie darauf, dass das ResMed-Logo dabei nach außen zeigt.
 - Positionieren Sie die unteren Bänder so, dass sie unterhalb der Ohren verlaufen.
 - Verbinden Sie die Magneten mit dem jeweiligen Clip auf dem Rahmen.
 - Passen Sie die Verschlüsse auf den oberen Bändern so an, dass die Maske gerade und stabil sitzt.
 - Befestigen Sie die Verschlusslaschen wieder.
 - Wiederholen Sie Schritt 4 mit den unteren Bändern.
 - Verbinden Sie den Luftschlauch des Therapiegeräts mit dem Kniestück, führen Sie dann das Kniestück in den Anschluss an der Maskenvorderseite ein, sodass es mit einem Klicken einrastet.
 - Schalten Sie das Therapiegerät ein.

Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

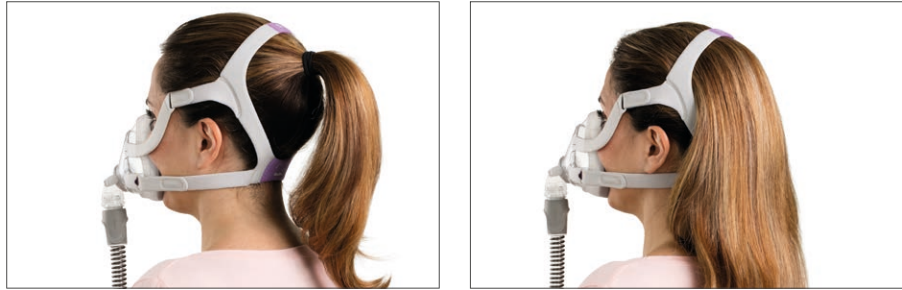

¹ ResMed internal study of existing 22 ResMed patients, conducted between 26/04/2016 – 27/05/2016 comparing the market leading mask with AirFit F20. Preliminary patient study – data on file; ID A3810791.
² ResMed AirFit F20 internal fitting study of 27 ResMed and non-ResMed patients, conducted between 30/03/2016 – 04/04/2016. Preliminary patient study – data on file; ID A3751086.
³ ResMed AirFit F20 internal international fitting study of 34 ResMed and non-ResMed patients, conducted between 11/04/2016 – 15/04/2016. Preliminary patient study – data on file; ID A3774922.
⁴ ResMed AirFit F20 internal international fitting study of 90 ResMed and non-ResMed patients, conducted between 06/06/2016 – 22/06/2016. Preliminary patient study – data on file; ID A3830701.

Vertrieb durch: ResMed Deutschland GmbH, Haferwende 40, 28357 Bremen, Tel 0421 48993-0, Fax 0421 48993-10, E-Mail info@resmed-deutschland.de
Vertrieb durch: ResMed Ltd, Bella Vista, NSW, Australien. ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA. **CE** **RE** **EP** ResMed (UK) Ltd, 96 Jubilee Ave Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RW UK. Weitere Standorte weltweit finden Sie unter www.resmed.com. AirFit und InfinitySeal sind Marken der ResMed Unternehmensgruppe und sind beim Patent- und Markenamt in den USA registriert. Technische Daten können ohne Ankündigung geändert werden.
© 2016 ResMed Ltd. **Art.-Nr. 1019718/2** (auf Grundlage von 1019492/1 2016-07), Obj.-ID. C224080 - 2 - 11 16



AirFit™ F20
Full face mask



AirFit F20 – da passt einfach alles!

Die AirFit F20 verfügt über ein innovatives Maskenkissen, das auch bei höchsten Therapiedrücken erwiesenermaßen die gewünschte Leistung erbringt. Durch das speziell entwickelte Design passt die Maske Patienten mit unterschiedlichsten Gesichtsformen und -größen. Besonders eignet sich die AirFit F20 für Patienten mit klaustrophobischen Neigungen, die nach einer wenig einengenden Maske suchen, die ein freies Blickfeld lässt.



- Universelle Passform**

In internationalen Studien passte die AirFit F20 96,5 % aller Patienten.^{1, 2, 3, 4} Sie können Ihre Patienten von Anfang an beruhigt mit einer passenden Maske nach Hause schicken.
- Zuverlässige Abdichtung**


Das besondere Merkmal dieser Maske ist das nachgiebige Maskenkissen, das erwiesenermaßen Leckagen verhindert, sich Bewegungen des Patienten anpasst und selbst bei höchsten Drücken zuverlässig abdichtet.
- Komfortabel**

Der flexible, textilmantelte Rahmen bietet zusätzlichen Komfort und sorgt durch sein spezielles Design außerdem für Stabilität und mehr Sichtfreiheit.

Das weiche, bewegliche Maskenkissen der AirFit F20 passt sich an die individuellen Gesichtskonturen des Patienten an – auf den sicheren und bequemen Sitz dieser Maske können Sie sich verlassen.



Internationale Studien haben gezeigt, dass die AirFit F20 bei 96,5 % der Patienten passt.^{1, 2, 3, 4}

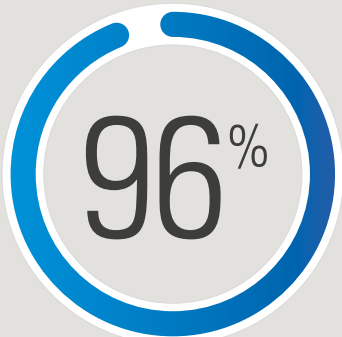


Tipps zur Größenbestimmung

Das Maskenkissen der AirFit F20 ist in drei verschiedenen Größen erhältlich: Small, Medium und Large. Durch das modulare Design der AirFit F20 lässt sich jede Kissengröße leicht in demselben Maskenrahmen befestigen. Ein schneller Wechsel ist ganz unkompliziert möglich.

Wir empfehlen die Verwendung der Anpass-Schablone, um die am besten geeignete Größe für Ihre Patienten zu bestimmen.

Die Schablone steht unter [ResMed.com/AirFitF20](https://www.resmed.com/AirFitF20) zur Verfügung.

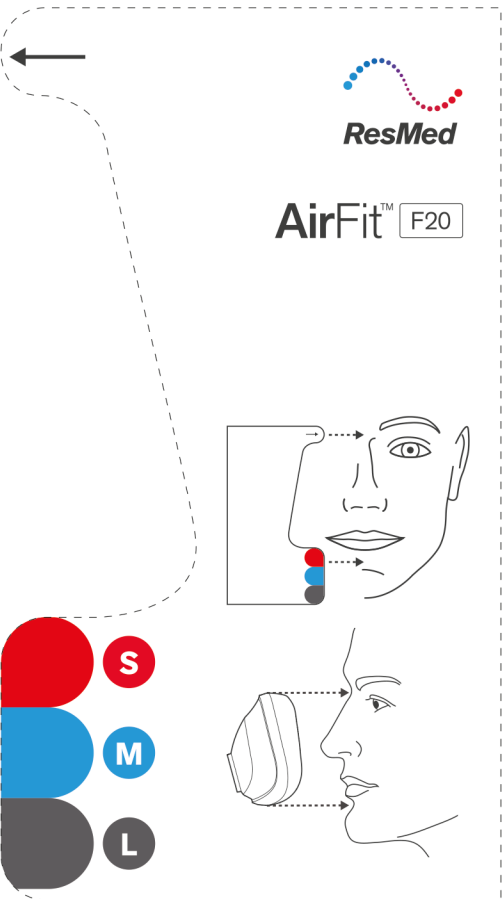

Freies Blickfeld

Der Rahmen verläuft unterhalb der Augen und sorgt für Stabilität bei gleichzeitig wenig Gesichtskontakt – das bedeutet mehr Bewegungs- und Sichtfreiheit für Ihre Patienten.

Weich und geschmeidig

Kopfband aus besonders weichem Textilgewebe passt sich verschiedenen Kopfformen & -größen an.

Schnelles Anlegen

Die AirFit F20 lässt sich in weniger als einer Minute anlegen.¹ Die magnetischen Clips ermöglichen ein sekundenschnelles An- und Ablegen der Maske.

Zuverlässige Abdichtung

Das spezielle Design des Maskenkissens vermeidet Leckagen, toleriert ungenaues Anlegen und dichtet auch bei variablen Drücken gut ab.


Weicher, flexibler Rahmen

Der flexible Rahmen passt sich an unterschiedlichste Gesichtsformen an. Die Polsterung bietet zusätzlichen Komfort.

Flexibler Anschluss, mehr Bewegungsfreiheit

Die Schnellösefunktion ermöglicht ein unkompliziertes Anschließen und Abtrennen des Kniestücks während der Nacht. Die 360°-Drehbarkeit sorgt für mehr Bewegungsfreiheit.

AirFit F20 Komponenten

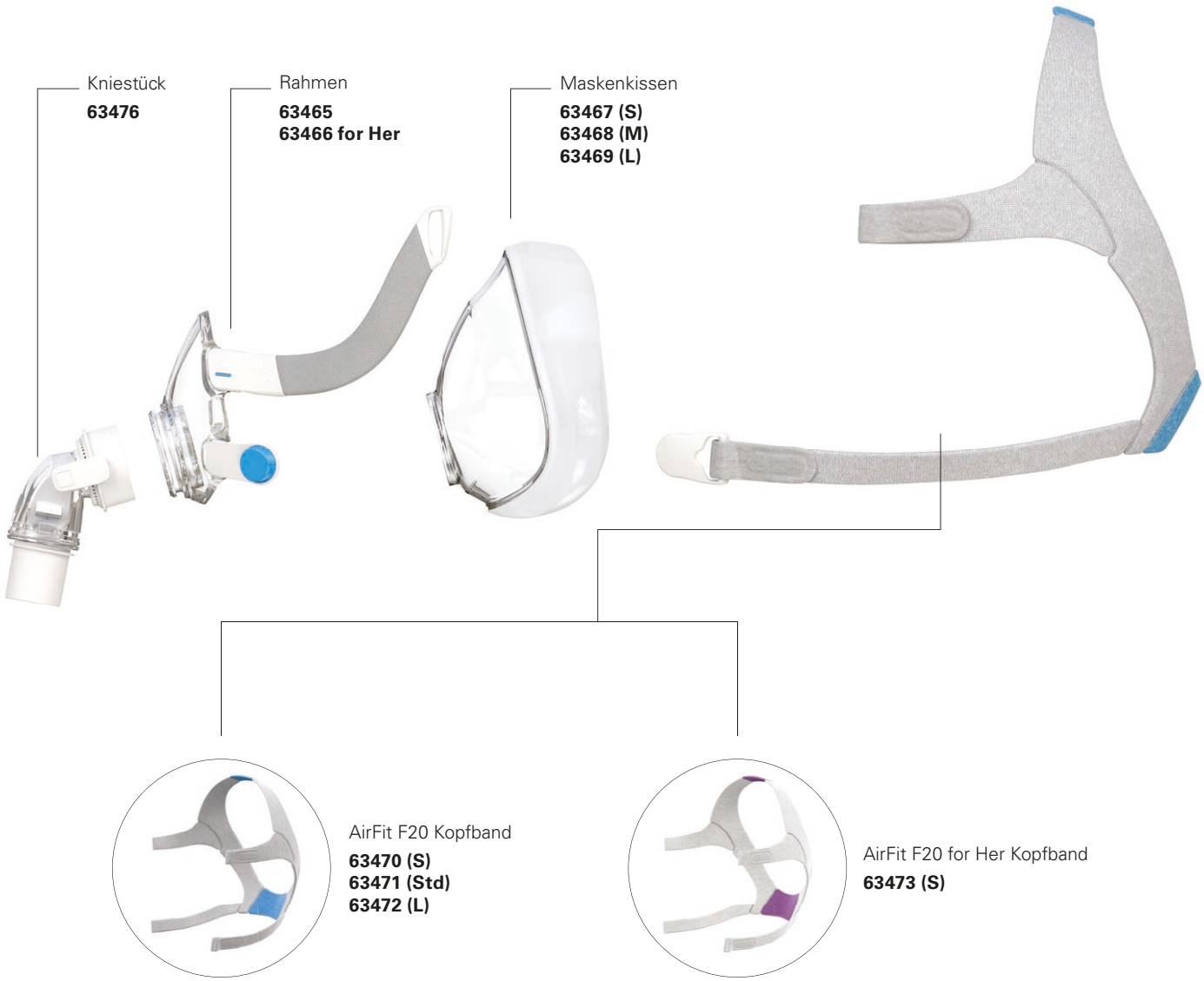

AirFit F20 for Her

Speziell für Frauen entwickelt, in einer etwas kleineren, den weiblichen Gesichtskonturen angepassten Größe.

Artikelnummern

AirFit F20: Small	63405
AirFit F20: Medium	63406
AirFit F20: Large	63407
AirFit F20 for Her: Small	63408
AirFit F20 for Her: Medium	63409

