



**Philips InnoSpire Elegance
Kompressor-
Verneblersystem**

Tischgerät für den Heimgebrauch

Therapie in 6 bis 8 Minuten*
*bei Verwendung mit 2,5 ml
Salbutamol
Vernebler-Set inbegriffen



HH1300

Vernebler-Therapie, auf die Verlass ist

Für eine konsistente Behandlung

InnoSpire Elegance bietet eine schnelle, effiziente und zuverlässige Aerosol-Wirkstoffabgabe zur Dauerbehandlung im Krankenhaus und zu Hause.

Kurze Behandlungszeiten

- Therapie erfolgt in 6 bis 8 Minuten*

Elegantes, robustes Design

- Robustes Design und Zuverlässigkeit

Bewährte SideStream Technologie

- Bewährte Vernebler-Technologie

Für die Verwendung im Krankenhaus und zu Hause

- Für eine dauerhafte Verwendung
- Kompatibel mit gängigen verschreibungspflichtigen Vernebler-Medikamenten

PHILIPS

Kompressor-Verneblersystem

Tischgerät für den Heimgebrauch Therapie in 6 bis 8 Minuten*, *bei Verwendung mit 2,5 ml Salbutamol, Vernebler-Set inbegriffen

Besonderheiten

Für den Gebrauch zu Hause




Robust genug für eine dauerhafte Verwendung sowohl in einer Klinikumgebung als auch zu Hause. InnoSpire Elegance bietet eine kontinuierliche und verlässliche Vernebler-Therapie.

Leistung und Eleganz in einem



Ein Design, das sich Ihrem Lifestyle anpasst und gleichzeitig einer häufigen Nutzung standhält. Sie können sich sicher sein, dass Sie während der Lebensdauer des Verneblers ein hochwertiges Aerosol erhalten.

Bewährte Vernebler-Technologie

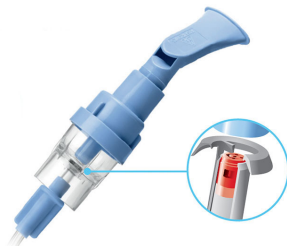

Verkürzte Behandlungszeiten – Unser SideStream Vernebler wurde speziell entwickelt, um Ihre

Behandlungszeiten so kurz wie möglich zu halten. Wenn der InnoSpire Elegance Luft durch das Röhrchen drückt, wird zusätzliche Luft durch die Oberseite des Verneblers eingesogen, um ein schnelles Einatmen der Aerosol-Medikamente zu ermöglichen. Eine Behandlung kann innerhalb von nur 6 Minuten erfolgen.* Konsistente Bereitstellung einer hochwertigen Aerosoltherapie – SideStream wurde für die häufige Verwendung entwickelt und wird Ihnen das Vernebler-Medikament so lange effizient verabreichen, bis es Zeit ist, ihn auszutauschen.

Behandlungszeit



In Kombination mit dem SideStream Vernebler bietet InnoSpire Elegance eine schnelle Wirkstoffabgabe und kurze Behandlungszeiten.

Vielfältigkeit



Kann die verschiedensten Medikamente vernebeln, die regelmäßig mit Verneblern verwendet werden, um verschiedene Atemwegserkrankungen zu behandeln.

HH1300/00

Daten

Design

- Kompakt: Wiegt nur 1,5 kg

Parameter für den Betrieb

- Elektrische Nennwerte/Leistung: 120 V/60 Hz, 1,7 A
- Max. Flussrate: 9,4 l/min
- Höchstdruck: 3 bar
- Betriebsart: Dauerbetrieb
- Betriebsflussrate: 7 l/min bei 0,7 bar

Leistungsdaten

- MMAD: 2,9 µm
- Feinpartikelfraktion: 77% unter 5 µm
- Verneblungskapazität: 8 ml

Produktangaben

- Gewicht: 1,5 kg
- Größe: 165 x 165 x 108 mm
- Geräuschpegel: 58 ±3 dBA
- Behandlungszeit (6 bis 8 Minuten*): *bei Verwendung mit 2,5 ml Salbutamol

Service

- Gewährleistung: 5 Jahre



Ausstellungsdatum
2018-03-08

Version: 6.1.1

12 NC: 0000 010 99973
UPC: 3 83730 99973 9

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* *bei Verwendung mit 2,5 ml Salbutamol