



- Uneingeschränkte Leistung für unterwegs
- Einfache Anwendung
- Mit einem Gewicht von nur gut 840 g
- 12-mm Micro-Flex Schlauch

HH1507/00

Innovative Schlaftherapie für unterwegs

Dank des schlanken Designs müssen 1/3 weniger Komponenten mitgenommen werden als bei anderen Schlaftherapie-Reisegeräten*. Dabei bietet die DreamStation Go dieselben Therapie- und Komfortfunktionen, denen bereits mehr als 5 Millionen Schlaftherapiepatienten weltweit vertrauen.

Produktübersicht

Das kleinste Schlaftherapiegerät von Philips

- Kompaktes Design
- Mit integriertem USB-Ladeanschluss
- Schnelle, einfache Einrichtung und intuitive Navigation

Mit nur gut 840 g das leichteste Schlaftherapiegerät von Philips

- Reise-Akku (separat erhältlich)

Der dünnste und leichteste Schlauch von Philips**

- Micro-Flex Schlauch

Entspricht den Vorschriften der FAA*

- Für Flugreisen*

Speicherung von Daten für Ärzte und Klinikteam

- Bluetooth ist bei allen Geräten Standard
- Mit Philips DreamMapper kompatibel
- MicroSD-Karte separat erhältlich.

PHILIPS

DreamStation Go

Besonderheiten

Integriertes Netzteil



Die integrierte Stromversorgung erleichtert den Transport. Mit den Abmessungen von 15 cm x 15 cm x 5,8 cm (L x B x H) kann das leichte und kompakte Gerät sogar in einer kleinen Tasche untergebracht und so überall mitgeführt werden. Eine Tasche für Maske und Schlauch ist im Lieferumfang enthalten.

Mit integriertem USB-Ladeanschluss



Zum einfachen Aufladen von Mobiltelefonen oder anderen Geräten, damit Sie die Steckdose für Lampen, Wecker usw. nutzen können. Ideal auf Reisen.

Entspricht den Vorschriften der FAA*



Um Sicherheitskontrollen an Flughäfen möglichst reibungslos verlaufen zu lassen, befindet sich auf der Unterseite der DreamStation Go ein Vermerk, dass es sich um ein medizinisches Gerät handelt, das für die Nutzung im Flugzeug geeignet ist. Das Gerät ist flugtauglich, sofern es über eine Netzsteckdose oder einen Akku betrieben wird. Für Informationen zur Art der Stromversorgung an Bord wenden Sie sich bitte vor dem Abflug an die jeweilige Fluggesellschaft. Dieses Gerät bietet einen automatischen Höhenausgleich bis zu 2.286 Metern. Eine manuelle Einstellung ist nicht erforderlich.

Intuitiver Touchscreen mit Farbdisplay



Über den intuitiven Farb-Touchscreen der DreamStation Go lassen sich die Geräteeinstellungen anpassen und Therapieinformationen anzeigen. Nutzen Sie unsere MyStart Funktion, mit der Sie den für Sie angenehmsten Anfangsdruck für die Auto-CPAP-Therapie einstellen können. Sollte sich der voreingestellte Luftdruck beim Schlafengehen zu hoch oder zu niedrig anfühlen, können Sie die MyStart Druckeinstellung nach oben oder unten korrigieren, um entspannt einschlafen zu können.

Micro-Flex Schlauch



Der im Lieferumfang der DreamStation Go enthaltene neue 12-mm Micro-Flex Schlauch ist der kleinste und leichteste Schlauch, den Philips je angeboten hat. Er kann platzsparend verpackt werden, zeichnet sich durch mehr Flexibilität und Bewegungsfreiheit aus und erhöht damit Ihren Schlafkomfort. Schneller und einfacher Anschluss am Gerät durch Klickverbindung und eine schlanke Verbindung zu unserer DreamWear Maske. Im Lieferumfang ist zudem ein 22-mm-ISO-Adapter für andere gängige Masken enthalten.

Reise-Akku




Wenn Sie eine Reise planen, bei der die Stromversorgung nicht gesichert ist, erleichtert Ihnen der Reise-Akku der DreamStation Go die Einhaltung Ihrer Therapie. Die DreamStation Go lässt sich bei einer Druckeinstellung von 10 cm H₂O durchschnittlich 13 Stunden*** lang über den DreamStation Go Reise-Akku versorgen. Die Akkulaufzeit kann bei höheren CPAP-Druckeinstellungen, nicht richtig sitzender Maske, in Abhängigkeit von Höhe und Temperatur oder bei Ladegeräten mit USB-Anschluss oder anderen Umständen abweichen.

Bluetooth



Damit können Sie Ihre Fortschritte am Heimtherapiegerät und dem tragbaren Schlaftherapiegerät verfolgen und überwachen.

Kompatibilität

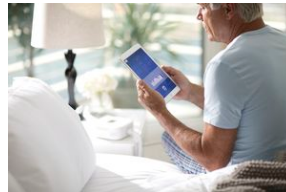

Dank der Kompatibilität mit dem Philips DreamMapper Selbstmanagement-Tool können Sie als Patient Ihre Therapie auch dann überwachen, wenn Sie gerade unterwegs sind. Sie verwenden die DreamMapper App bereits mit einem anderen Philips Schlaftherapiegerät? Kein Problem. DreamMapper ermöglicht Nutzern nun die Synchronisierung mehrerer Philips Schlaftherapiegeräte mit einem Konto mit gemeinsamer Ansicht.

DreamStation Go

MicroSD-Karte separat erhältlich.



Möglichkeit zur Speicherung wichtiger Daten für Ärzte und Klinikteam.

Daten

Dies ist eine Vorverkaufsbroschüre. Die Inhalte dieser Broschüre spiegeln unser bestes Wissen bis zum heutigen Tag und für das oben genannte Land wider. Die Inhalte dieser Broschüre können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Philips schließt jegliche Haftung für die Inhalte dieser Broschüre aus.

Service

Gewährleistung 2 Jahre

Technische Daten

Druckbereich 4 bis 20 cm H₂O
Druckmodus/Druckmodi APAP
Flex-Komfort zur Ausatmerleichterung 1 bis 3
Flex-Modi C-Flex, C-Flex+, A-Flex
Rampendauer 0 bis 45 Minuten (in 5-min-Schritten)
Anfangsdruck Auf den Patienten einstellbar, SmartRamp

Abmessungen 15 cm (L) x 15 cm (B) x 5,8 cm (H)
Gewicht 844 g
Filter Pollenfilter, wiederverwendbar
Einrichtung des Geräts Farb-Touchscreen
Speicherkapazität MicroSD-Karte (optional)
Integriert: > 1 Jahr
Compliance-Messfunktion Atmungserkennung
Höhenausgleich Automatisch
Anforderungen an die Stromversorgung 100 bis 240 VAC, 50/60 Hz

* Im Vergleich zu HDM Z1 und Somnetics Transcend Geräten (2016).

**Im Vergleich zum Philips 22-mm Performance-Schlauch.

***Laufzeit des DreamStation Go Reise-Akkus: CPAP-Modus, Druck 10 cm H₂O, 12-mm-Schlauch, 37 l/min Verlust, 23 °C Raumtemperatur und Höhe von 500 m über NN.



Ausstellungsdatum
2017, Dezember 8

Version: 2.5.1
EAN: 606959048591

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com